


# Co je to IPL a jak funguje?


## Proč IPL?

Určitě jste si všimli, že pokud máte ve slunečné dny oblečené tmavé triko, je vám po určité době nepříjemně horko. Příčinou je tmavá barva absorbující sluneční paprsky. Totéž se děje při používání IPL přístroje.


Tmavý pigment, který obsahují folikuly chloupků, přitahuje intenzivní pulzní světlo. Chloupky se následně přehřejí a zničí.

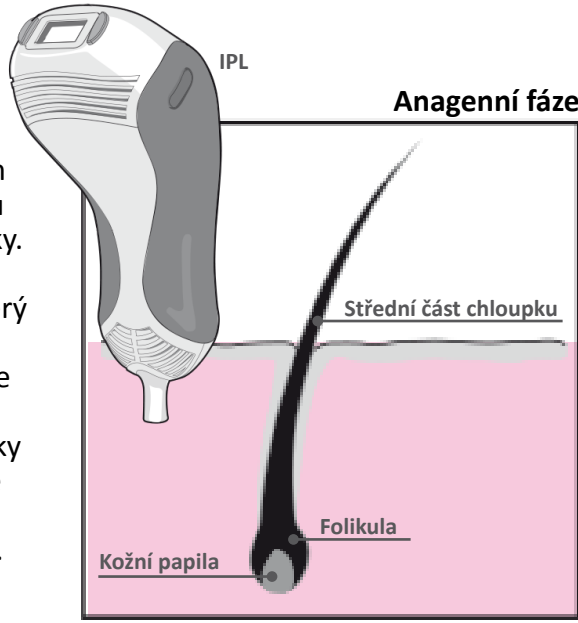


## Růstové fáze chloupku:

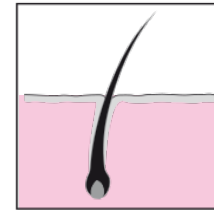

**Anagenní**  
3 – 5 let

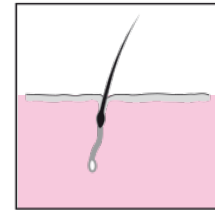

**Katagenní**  
1 – 3 týdny

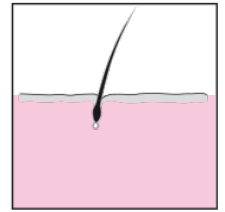


**Talogenní**  
5 – 6 týdnů

## Kolik ošetření je třeba?

Všeobecně stačí 5-7 opakování rozložených do 4-6 týdnů, zvláště pokud chceme dosáhnout úplného odstranění chloupků. Vlasové folikuly, které absorbují intenzivní pulzní světlo, už nikdy nevyrostou. Některé folikuly zůstanou nečinné a mohou se stát znovu aktivními vlivem hormonálních změn nebo věkem, ale tyto reaktivované folikuly budou světlejší, jemnější a méně husté.


## Jak to funguje?

Chloupky rostou ve třech fázích, které se cyklicky opakují. Hlavní růstová fáze (anagenní), přechodná fáze (katagenní) a oddechová fáze (talogenní). Na našem těle je vždy 85 % chloupků v anagenní fázi růstu. IPL má vliv na chloupky právě v této fázi. V době anagenní fáze je folikula nejhluběji v pokožce. IPL může proniknout až k folikule, zahřát ji a tak zničit chloupek.

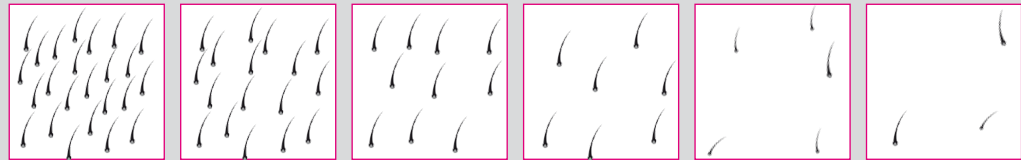

Po úvodním ošetření

Po 5 – 7 ošetřeních

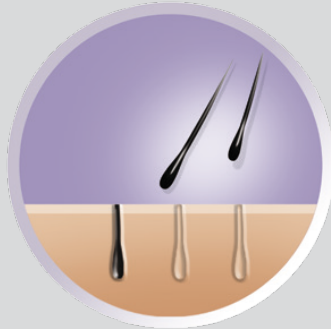

**ANAGEN**

**CATAGEN**





**TELOGEN**

## Proč jsou potřeba opakovaná ošetření?

Potřeba je 5-7 ošetření, protože chloupky mohou být ovlivněny IPL jen v anagenní fázi. Chloupky, které jsou v katagenní nebo talogenní fázi potřebují čas, aby se znovu dostali do anagenní fáze růstu.

## Co můžete udělat pro nejlepší výsledky?

Vaše chlupy by měly být podstatně tmavší než vaše pokožka – díky tomu bude IPL přitahované tmavým pigmentem vlasového folikulu a bez problémů přejde přes světlejší pigment pokožky. Lidé s tmavší pokožkou nebo s velmi světlými chloupky nejsou nejvhodnějšími kandidáty pro trvalé odstraňování chloupků pomocí IPL. Lidé, kteří jsou opálení, by měli před prvním ošetřením počkat, dokud jim pokožka opět nevybledne.

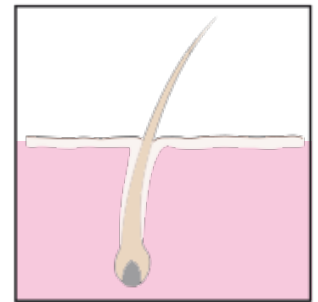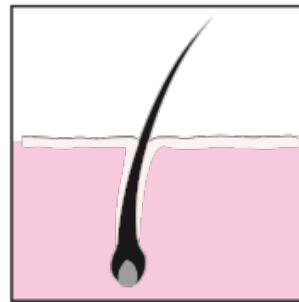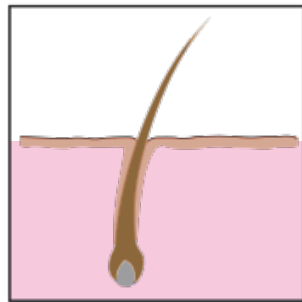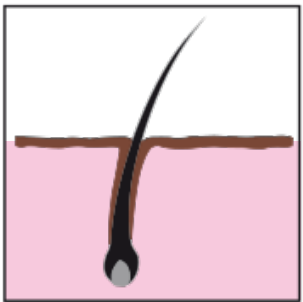

## Vyhýbejte se těmto věcem 4-6 týdnů před ošetřením:

Krémy na odstranění chloupků

Barvy na vlasy

Epilační vosk

Pinzeta (epilační strojek)

## Věci způsobující ztmavnutí vaší pokožky, čímž se celý proces stává složitějším:

Nadměrné působení slunka

Solária

Samoopalovací spreje

Samoopalovací krémy

## IPL6250 Remington



## IPL6500 Remington



## IPL6750 Remington

